



E-vita[®]
openplus

Tessitura esclusiva a sanguinamento zero

L'Endoprotesi Toracica studiata per la
chirurgia a cuore aperto

L'Endoprotesi Toracica studiata per la chirurgia a cuore aperto




Il sistema ibrido E-vita open plus

I componenti perfetti per un successo terapeutico garantito

L'endoprotesi E-vita open plus consente, in un singolo intervento di combinare i vantaggi della ricostruzione chirurgica vascolare classica, con la moderna tecnica endovascolare.

L'endoprotesi E-vita open plus è caricata in un sistema di rilascio che comprende sia la parte endoprotesica, che la cuffia chirurgica.

Sia l'endoprotesi che la cuffia chirurgica, sono composte dallo stesso tessuto in poliestere Woven "blood tight" e suturate a stent in nitinolo.

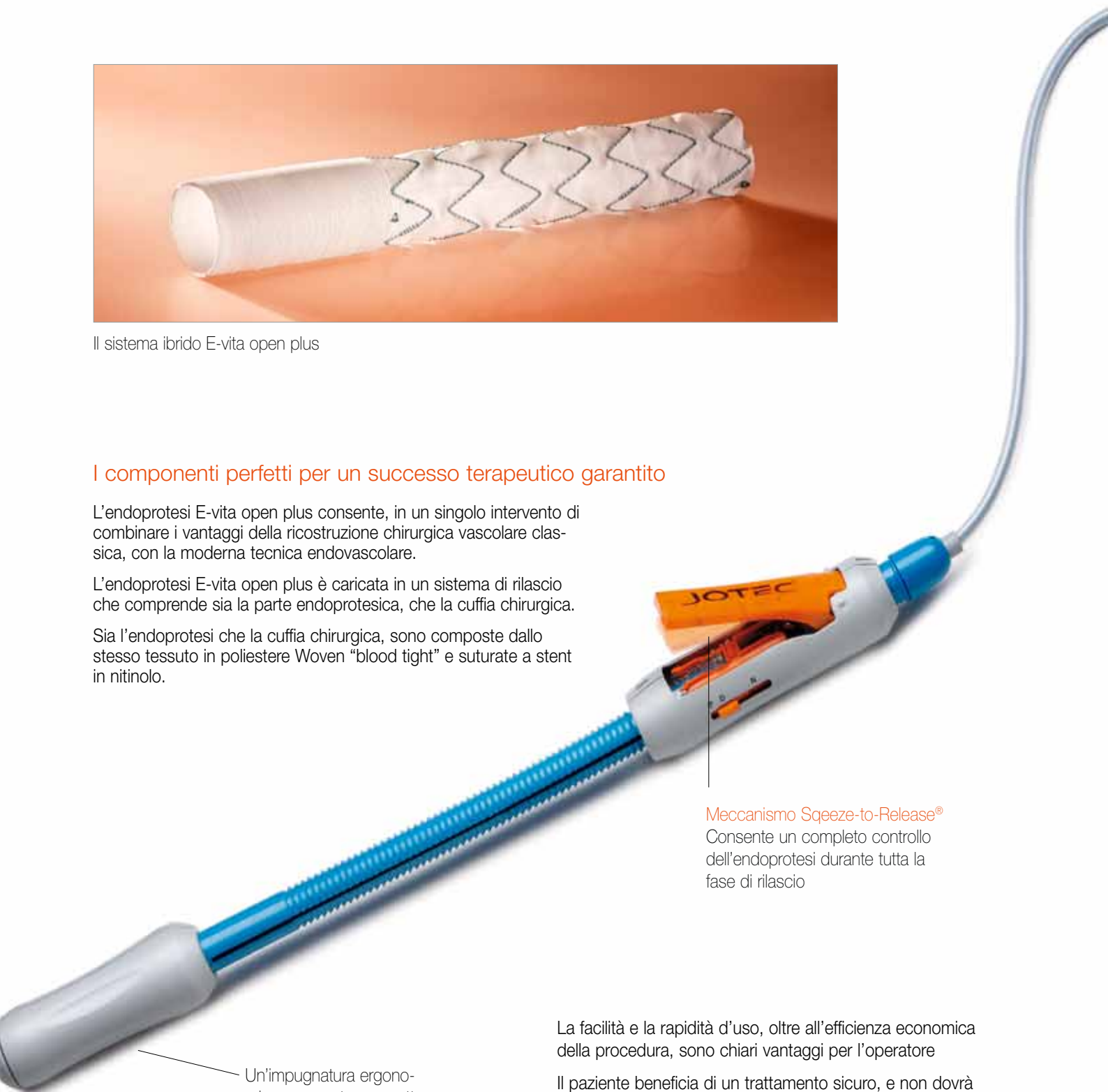

Meccanismo Squeeze-to-Release®
Consente un completo controllo dell'endoprotesi durante tutta la fase di rilascio

La facilità e la rapidità d'uso, oltre all'efficienza economica della procedura, sono chiari vantaggi per l'operatore

Il paziente beneficia di un trattamento sicuro, e non dovrà poi essere sottoposto ad un successivo intervento

Un'impugnatura ergonomica, consente un esatto posizionamento durante l'introduzione ed il rilascio dell'endoprotesi

La punta arrotondata preserva la parete aortica da qualsiasi traumatismo



Il sistema di rilascio è composto da un catetere armato, che garantisce un'ottima pushability e una precisa torquability

Ottimizzazione della procedura di "Elephant Trunk" attraverso la combinazione della tecnica chirurgica, e della tecnica endovascolare

L'endoprotesi E-vita open plus, è la soluzione ideale quando l'accesso chirurgico dell'aorta toracica discendente non è consentito. La cuffia chirurgica in poliestere Woven garantisce un supporto chirurgico sicuro, oltre che una base ideale per la ricostruzione classica dell'arco aortico.

Le seguenti patologie, possono essere trattate in un'unica procedura, grazie all'utilizzo del sistema E-vita open plus:

- Dissezioni Aortiche acute di Tipo A (Stanford)
- Dissezioni Aortiche di tipo B (Stanford) complesse
- Aneurismi Toracici con estensione diffusa
- Dissezioni Aortiche croniche con estensione diffusa




Dissezione Aortica



Rilascio dell' Endoprotesi



Estrazione della cuffia chirurgica

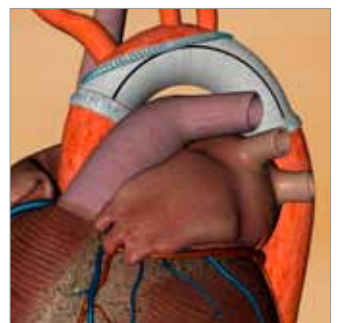

Ricostruzione completa dell'arco aortico

L'Endoprotesi Toracica studiata per la chirurgia a cuore aperto

Informazioni relative all'ordine

Il sistema E-vita open plus è disponibile nei diametri da 24 a 40 mm. Sia il training degli operatori, che il supporto tecnico di uno specialista in sede d'impianto, sono parte del nostro servizio.

La spedizione in Europa dei prodotti standard è garantita entro le 24 ore dalla richiesta. Per informazioni contattate il nostro ufficio al numero: +39 (02) 30310061

E-vita open plus

Lunghezza della cuffia (mm)	Diametro della Cuffia (mm)	Diametro prossimale dell'endoprotesi (mm)	Diametro distale dell'endoprotesi (mm)	Lunghezza dell'endoprotesi (mm)	Numero di Catalogo
70	24	24	24	150	71AC2424S15-PL
70	28	28	28	150	71AC2828S15-PL
70	30	30	30	150	71AC3030S15-PL
70	33	33	33	160	71AC3333S16-PL
70	36	36	36	160	71AC3636S16-PL
70	40	40	40	160	71AC4040S16-PL